


Quick Start Guide


SmartMat™

GET TO KNOW YOUR SMARTMAT™


TOP VIEW

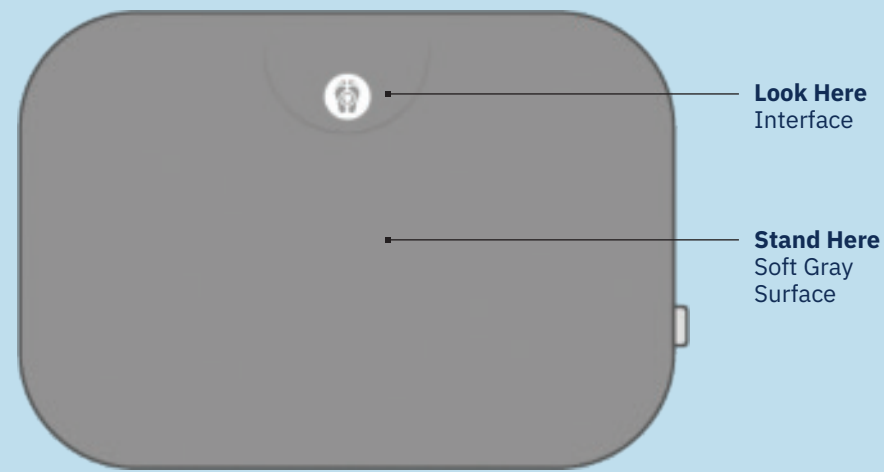

SIDE VIEW

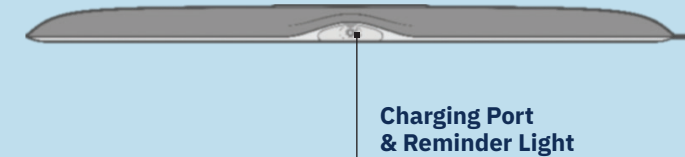

BOTTOM VIEW

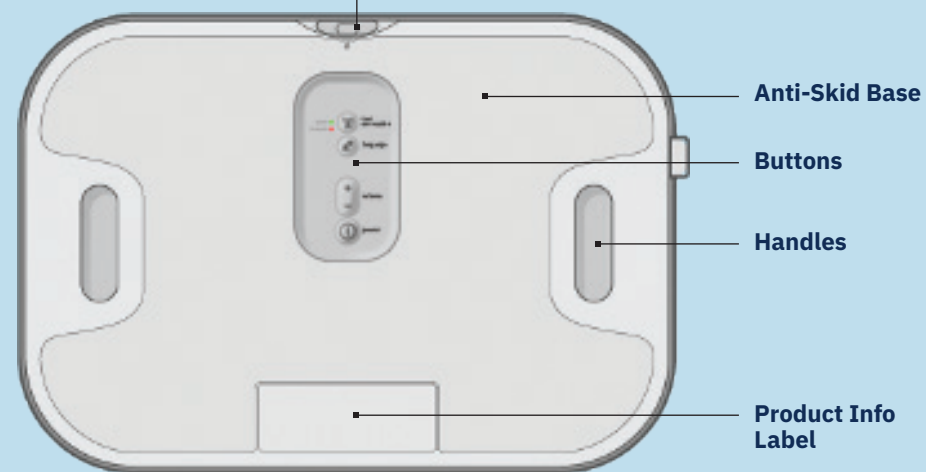


SET UP AND USE YOUR SMARTMAT™

1 UNPACK

Take the SmartMat™ out of the packaging and remove the clear protective cover.

2 SETUP


Turn the SmartMat™ over to access the button pad. Turn the Mat ON, and set the volume and language.

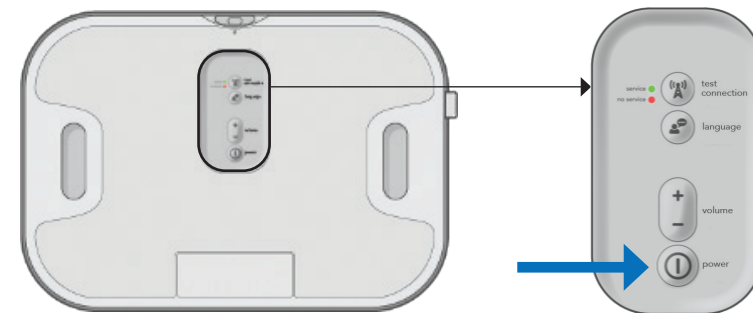

BOTTOM

3 CHECK CELLULAR SERVICE

Make sure the green “service” light illuminates in the place where you’re going to keep your SmartMat™. Press the “test connection” button to recheck.

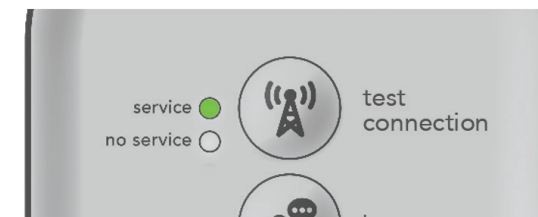

4 PLACE THE MAT

Find a flat place for your SmartMat™ without too much foot traffic or water. Put it on the floor with the soft gray side facing up.




5 START A SCAN

Once every day, stand on the SmartMat™ barefoot. Don’t leave it plugged in. The Mat cannot take a scan with a low battery or when plugged in.



6 STAND STILL

Don’t move your feet until the scan is done.

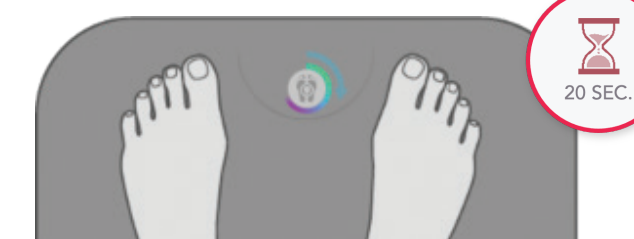


7 SCAN COMPLETE

You can now step off the SmartMat™. Your scan will be automatically transmitted to a server for online review.



TROUBLESHOOTING GUIDE

INTERFACE

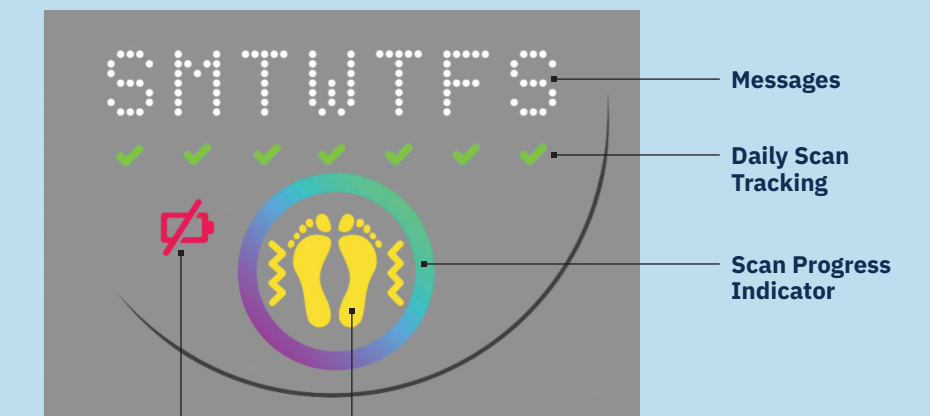


Low Battery Warning
Plug in the provided charger overnight.

Stability Error
Stand still throughout the entire scan. You will see this error symbol if you get off the SmartMat™ before the scan is complete.

BUTTON PAD

No Cellular Service
When you press the “test connection” button, if the red light turns on (no service), move your SmartMat™ to another place with a better cellular signal.

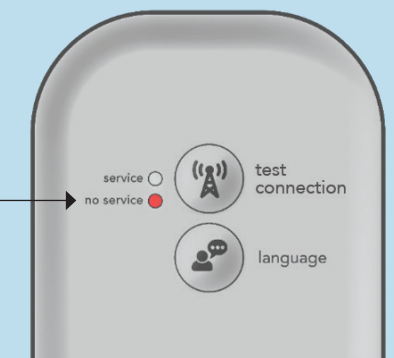

QUESTIONS: CALL 1-888-498-6489


Read the User Manual for complete instructions.

WARNING: Do not use the Podometrics Mat with an open wound on your foot.


Guía de Inicio Rápido SmartMat™

INFORMACIÓN SOBRE SU ALFOMBRA SMARTMAT™

VISTA SUPERIOR

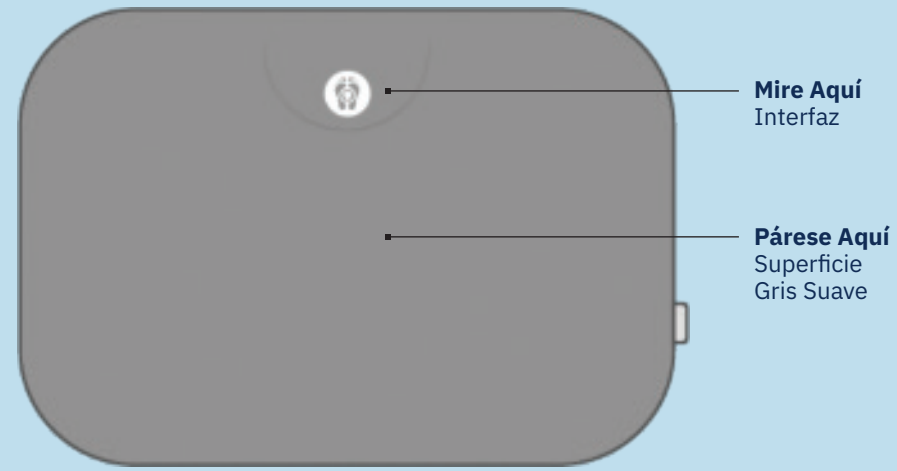


VISTA LATERAL

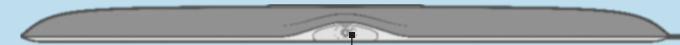

Puerto de Carga y Luz de Aviso

VISTA INFERIOR

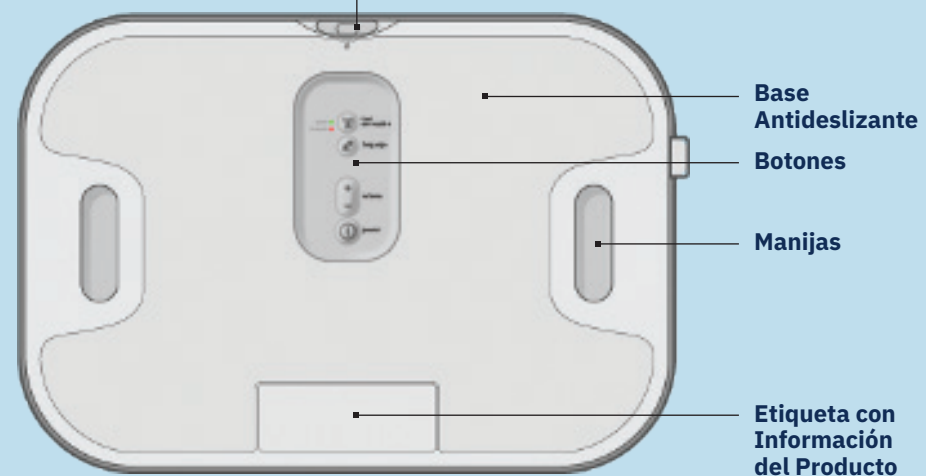


CÓMO CONFIGURAR Y USAR SU ALFOMBRA SMARTMAT™

1 DESEMBALAJE

Saque la Alfombra SmartMat™ del envoltorio y retire la cubierta transparente de protección.

2 CONFIGURACIÓN


Voltee la Alfombra SmartMat™ para acceder al panel de botones. Encienda la Alfombra y establezca el volumen y el idioma.

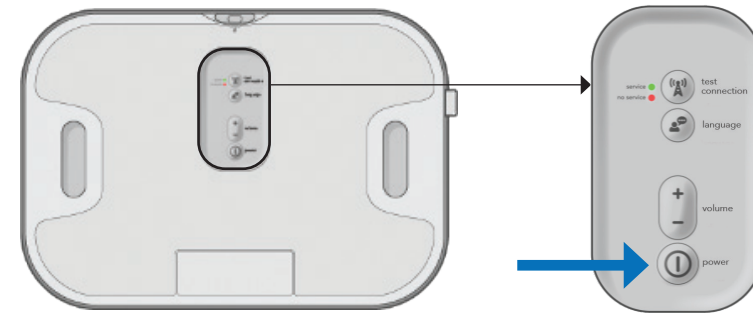

PARTE INFERIOR


3 VERIFICACIÓN DEL SERVICIO CELULAR

En el lugar donde ubicará la Alfombra SmartMat™, verifique que la luz verde de “service” (servicio) se encienda. Para volver a verificar, presione el botón “test connection” (verificar servicio celular).

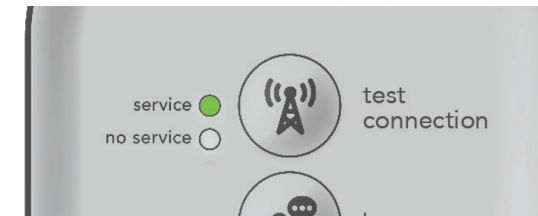

4 UBICACIÓN DE LA ALFOMBRA

Busque un lugar plano, sin agua y con poca circulación de personas, para colocar la Alfombra SmartMat™. Apóyela en el piso con la superficie gris suave hacia arriba.

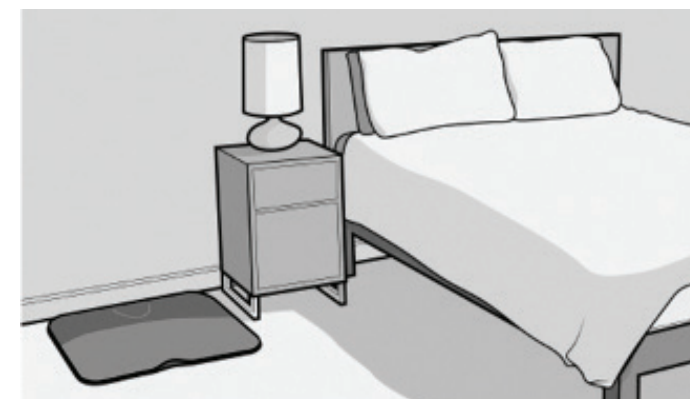

5 CÓMO INICIAR UN ANÁLISIS

Una vez al día, párese con los pies descalzos sobre la alfombra SmartMat™. No la deje enchufada. La alfombra no puede realizar un análisis si está enchufada o si tiene poca batería.



6 POSICIÓN: PÁRESE QUIETO

No mueva los pies hasta que el análisis haya finalizado.




7 ANÁLISIS COMPLETO

Ahora ya puede salir de la Alfombra SmartMat™. Su análisis se transmitirá automáticamente a un servidor para una revisión en línea.



GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INTERFAZ

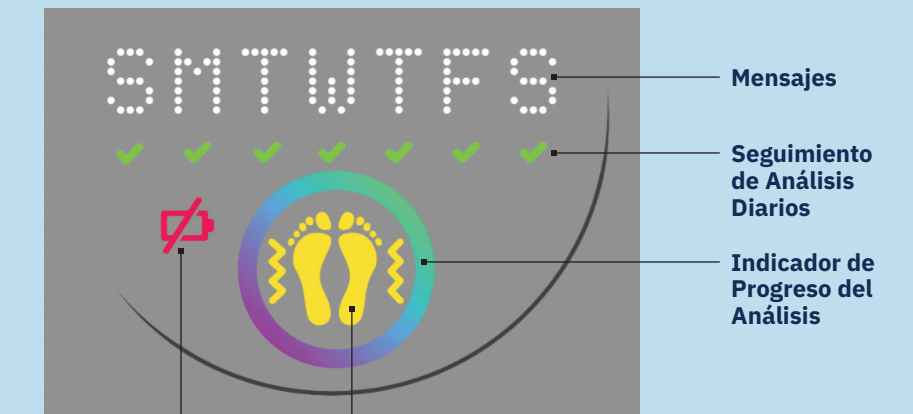

Advertencia de Bajo Nivel de Batería

Durante la noche, enchufe el cargador


Error de estabilidad

Párese quieto durante todo el análisis. Verá este símbolo de error si sale de la Alfombra SmartMat™ antes de que el análisis finalice.

PANEL DE BOTONES

Sin servicio celular

Si al presionar el botón “test connection” (verificar servicio celular) se enciende la luz roja de “no service” (sin servicio), lleve su Alfombra SmartMat™ a otro lugar donde haya mejor señal de celular.

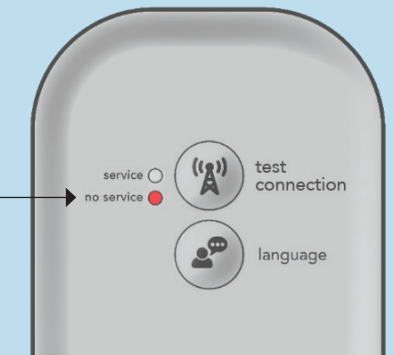

¿PREGUNTAS? LLAME AL
1-888-498-6489

Para obtener todas las instrucciones, lea el Manual del usuario.

ADVERTENCIA: No use la Alfombra Podimetrics si tiene una herida abierta en el pie.